

# SENSATION<sup>®</sup>

*The Art of Beauty*

SMART BODY SCALE  
battery-free scale



ISTRUZIONI PER L'USO

Art. 869

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

- E' necessaria la massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini: questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se risulta danneggiato o difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Quando si utilizza l'apparecchio posizionarlo sempre su una superficie piana e asciutta.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Per risultati precisi posizionare l'apparecchio su una superficie piana. Cercare di stare il più possibile fermi mentre l'apparecchio effettua la misurazione del proprio peso.
- Prima di salire sulla bilancia assicurarsi che sia completamente asciutta. Salire e scendere con cautela.
- Per la pulizia dell'apparecchio servirsi di un panno umido. Evitare che acqua o altri liquidi penetrino al suo interno. Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi.
- Per non danneggiare il sensore, si consiglia di non superare la portata massima di 180 kg.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti pesanti quando non è in uso.
- Non riporre l'apparecchio in posizione verticale.
- Non esporre l'apparecchio ad alcun tipo di urto. Eventuali cadute o urti accidentali possono danneggiarlo.

### Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

**IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: [www.macomsl.it/garanzia](http://www.macomsl.it/garanzia)**

### DESCRIZIONE BILANCIA

Display LCD



Pulsante di ricarica

Selettore unità di misura



Piedini antiscivolo

## FUNZIONAMENTO

Scelta unità di misura (Kg/lb)




Selezionare l'unità di misura desiderata premendo il tasto posto sul retro dell'apparecchio.

Nota: la scelta dell'unità di misura deve avvenire prima di pesarsi.

## COME PESARSI

- 1: Per garantire una misurazione del peso il più possibile precisa posizionare l'apparecchio su una superficie piana e asciutta. Evitare tappeti o superfici morbide.
- 2: Per caricare, premere il pulsante con il piede.
- 3: Salire sulla bilancia solamente quando sul display apparirà "0.0" (zero).

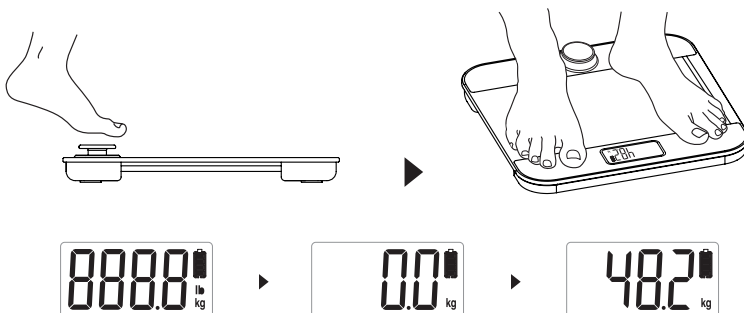

Il peso resterà visualizzato per alcuni secondi prima dello spegnimento automatico.

## INDICAZIONI DISPLAY



indica la bilancia è sovraccarica.



indica che l'apparecchio è scarico, premere il pulsante per ricaricarlo.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Pulire l'apparecchio con l'aiuto di un panno umido e poi asciugarlo.

Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi.

Riporre in luogo asciutto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 180 kg

Divisione: 100 g

Dimensioni: L 304 x H 47 x P 304 mm

Colore: bianco

Unità di misura: kg - lb

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

### ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

## GARANZIA CONVENZIONALE

**IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:  
[www.macomsrl.it/garanzia](http://www.macomsrl.it/garanzia)**

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da **Macom** medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da **Macom** nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale è valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

## **MACOM srl**

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: [info@macomsrl.it](mailto:info@macomsrl.it) - [www.macomsrl.it](http://www.macomsrl.it)